

# FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

## CABECEROS TEDISEL ABITUS

### MODELO

ABITUS

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- EN 13348
- EN ISO 5359
- EN ISO 11197
- EN ISO 13485
- DIRECTIVA 93/42 CEE

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Tedisel
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

### DESCRIPCIÓN

**ABITUS** es un sistema integrado de cabecera suspendido de techo que ha sido diseñado para equipar unidades de cuidados intensivos y neonatología. Las áreas críticas requieren soluciones para cubrir grandes demandas en cuanto a ergonomía, higiene y versatilidad. Estos aspectos y otras consideraciones son muy apreciadas especialmente entre el personal médico en el sentido de garantizar el mejor cuidado del paciente. Abitus posee tres funciones principales diferenciadas dentro del hospital y según el área a la que vayan destinadas:

- Canalización de gases medicinales y alojamiento de unidades terminales (ajustables por el operador en las columnas).
- Canalización de sistemas de evacuación de gases anestésicos y alojamiento de unidades terminales.
- Servicios eléctricos generales (ajustables por el operador en las columnas).
- Iluminación.


Los sistemas integrados Abitus se fabrican mediante perfiles de aluminio extruido para formar los diferentes chasis de las partes del equipo. Los plásticos difusores de los módulos de alumbrado instalados, son de policarbonato. Los accesorios utilizados pueden ser de acero inoxidable o aluminio, aunque pueden existir elementos de plástico para partes embellecedoras.

## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Abitus	UCI, Neonatología, Áreas Críticas

### CONFIGURACIÓN

En la figura se puede observar una configuración del equipo. A continuación se detallan los rangos de medida más habituales para cada una de las dimensiones especificadas en la figura.

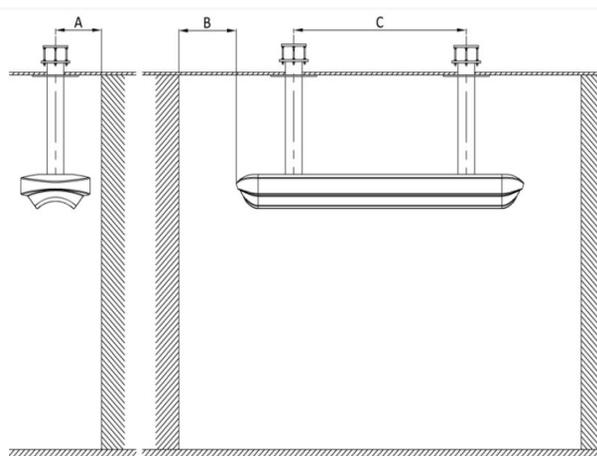

- A** Distancia a la pared en paralelo al cuerpo principal del equipo (mm) - min 400
- B** Distancia a la pared perpendicular al cuerpo principal del equipo (mm) - min 300
- C** Distancia entre soportes a techo por cama (mm) - max 1500



Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: Tedisel Medical. Sant Lluç, 69-81 Nave 5, 08918 - Badalona, Barcelona - Spain