

SDGM

Equipo

## CABECEROS TEDISEL ADONIS



### MODELO

Adonis

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- EN ISO 11197
- EN-ISO 13485
- DIRECTIVA 93/42/CEE

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Tedisel
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

### DESCRIPCIÓN

Los cabeceros **ADONIS** (sistemas integrados de cabeceros adosados) están destinados a dar servicio a todo tipo de locales de uso médico. Están pensados para ir adosados a pared y su construcción está basada en perfiles de aluminio que permiten albergar todos los elementos necesarios para dar servicio a este tipo de dependencias.

Los sistemas poseen tres funciones principales diferenciadas dentro del hospital y según el área a la que vayan a ser destinadas:

- Canalización de gases medicinales y alojamiento de unidades terminales.
- Servicios eléctricos generales.
- Iluminación.

Los sistemas integrados ADONIS se fabrican mediante perfiles de aluminio extruido para formar los diferentes modelos. Los plásticos difusores de los módulos de alumbrado instalados, son de policarbonato estriado. Los accesorios utilizados pueden ser de acero inoxidable o aluminio.




## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Adonis	ÁREAS CRÍTICAS / NEONATOLOGÍA / Hospitalización / UCI

### CONFIGURACIÓN

Recomendados especialmente para habitaciones de hospitalización, UCI, reanimación y cualquier área crítica de un hospital. Los módulos de alumbrado forman un ángulo de 60° con la vertical, quedando el carril central destinado para la canalización de gases y el inferior para la integración de los mecanismos eléctricos en toda su longitud (a excepción de donde se localizan los módulos de luz directa).

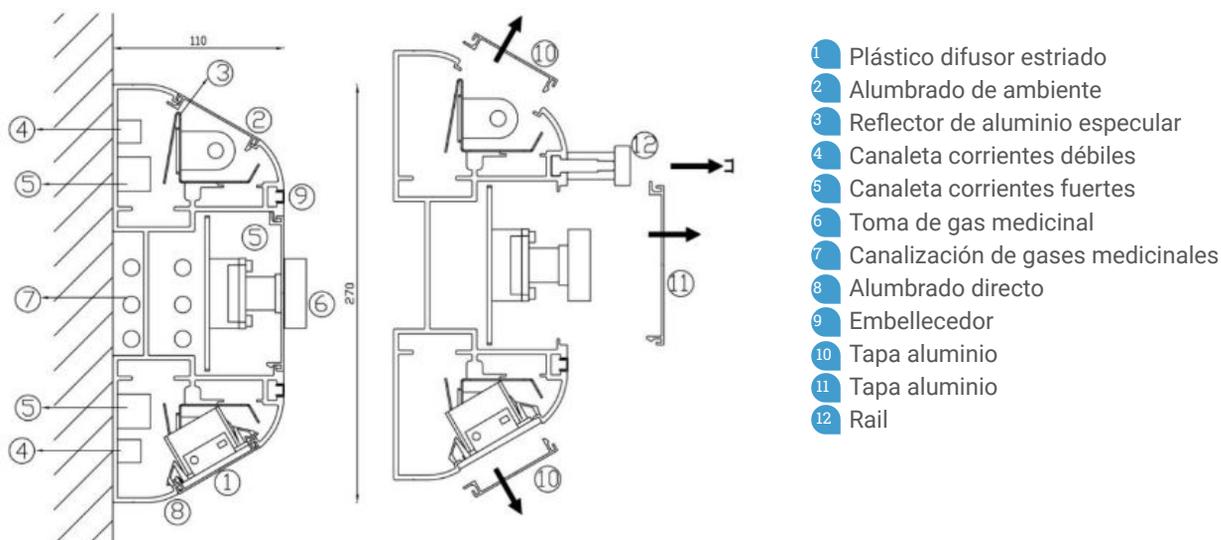

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: Tedisel Medical. Sant Lluç, 69-81 Nave 5, 08918 - Badalona, Barcelona - Spain