

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV AXIS

MODELO

Axis

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- EN ISO 11197
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 7396-1
- Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

Iluminación continua


El cabecero horizontal AXIS ofrece la posibilidad de una luz directa continua, lo que aumenta la apreciación estética.

Diseño y ergonomía

El cabecero horizontal puede integrar un soporte vertical de tubo de acero inoxidable opcional y un estante que se colocaría en la parte inferior del cabecero de la cama.


Personalización

La cubierta es totalmente personalizable en el color que elija: madera lisa o lámina decorativa. Se adapta fácilmente a la decoración de la habitación.

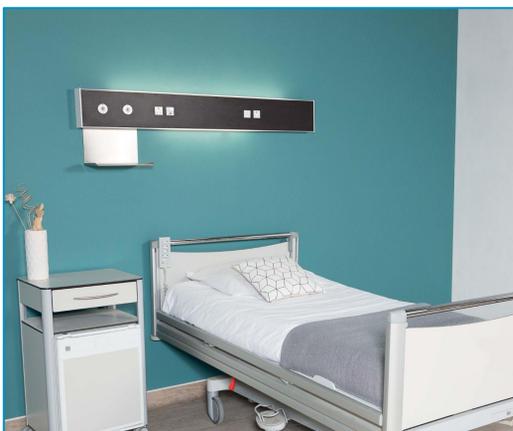


GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Axis	Hospitalización

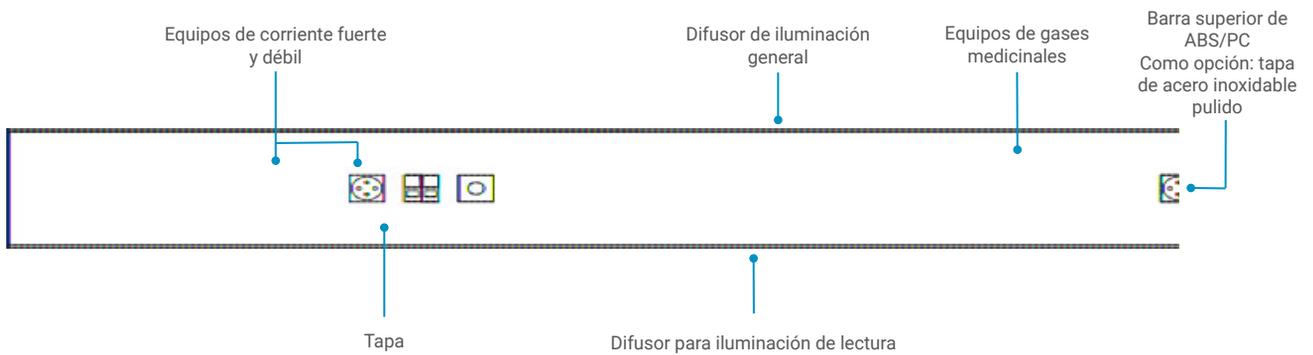

CONFIGURACIÓN


Axis

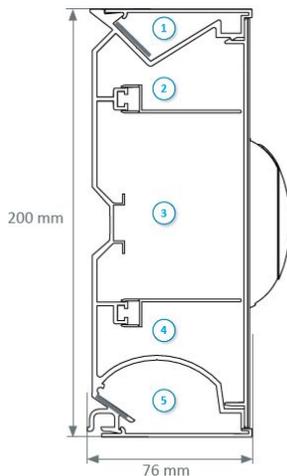

- 1 Compartimento de luz general y nocturna
- 2 Compartimento de corriente débil
- 3 Compartimento de corriente de alimentación
- 4 Compartimento de gases medicinales
- 5 Compartimento para la luz de lectura

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN

- Habitación estándar
- Dimensiones de la sala: 3m x 3m, altura del techo 2,5m
- Coeficientes de reflexión: techo 7, paredes 5 y suelo 3
- Coeficiente de depreciación 0,83

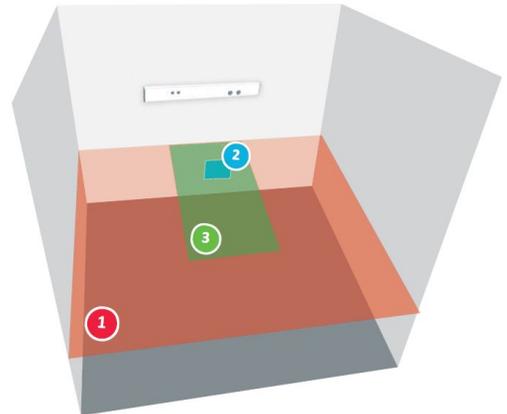

Iluminación general




Plano de iluminación general virtual de una superficie igual a la de la habitación, situada a 0,85 m del suelo (3 m x 3 m para una habitación individual).

Iluminación de lectura

Plano de lectura virtual de 0,3 m x 0,3 m inclinado a 75° situado a 1,1 m del suelo y a 1 m de la pared donde se encuentra la unidad.

Iluminación de cuidado

Plano de examen virtual de 2 m x 0,9 m situado a 0,85 m del suelo, centrado en la anchura y a 0,1 m de la pared.

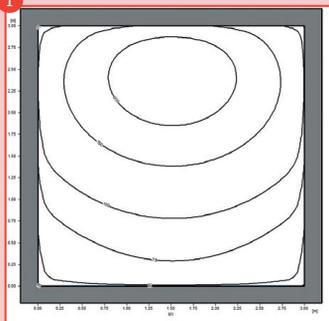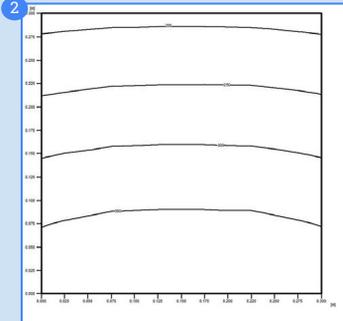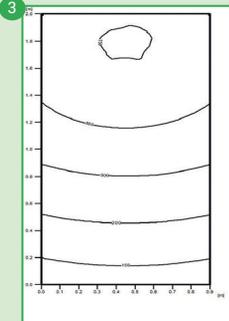	Módulo 4 Ft	Módulo 2 Ft	Iluminación general y luces de lectura combinadas
LED			
Consumo	42,2 W	21,5 W	63,7 W
Iluminación media	131 lx	301 lx	410 lx

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France