

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV MULTICARE EVOLUTION

MODELO

Multicare Evolution

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

La columna de suspensión **MULTICARE EVOLUTION** es ideal para la distribución de gases medicinales y el suministro de corrientes débiles y fuertes en salas de recuperación, unidades de cuidados intensivos, unidades de reanimación u otros departamentos especiales de examen/reanimación de la UCI.

Su ergonomía la hace adaptable a la zona de tratamiento y optimiza el acceso al paciente y la zona de trabajo del equipo sanitario. La columna puede equiparse con un brazo móvil de doble articulación y una caja de distribución para distribuir corrientes débiles, corrientes fuertes y gases medicinales.

Equipamiento :

Los raíles de soporte de accesorios, situados en la parte delantera y trasera, permiten colocar numerosos equipos biomédicos.

Como opción, toda la columna:


- Un riel de soporte de secreciones, que se encuentra en la parte inferior.
- Brazo móvil con doble articulación que proporciona una capacidad de transporte de 40 Kg.
- Caja de distribución de 605 mm de altura, equipada con uno o dos tubos de acero inoxidable de Ø38 x 605 mm para soportar los accesorios biomédicos. Garantizará la distribución de las corrientes fuertes y débiles y de los gases medicinales.



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Multicare Evolution	UCI / Exames Esp.

CONFIGURACIÓN

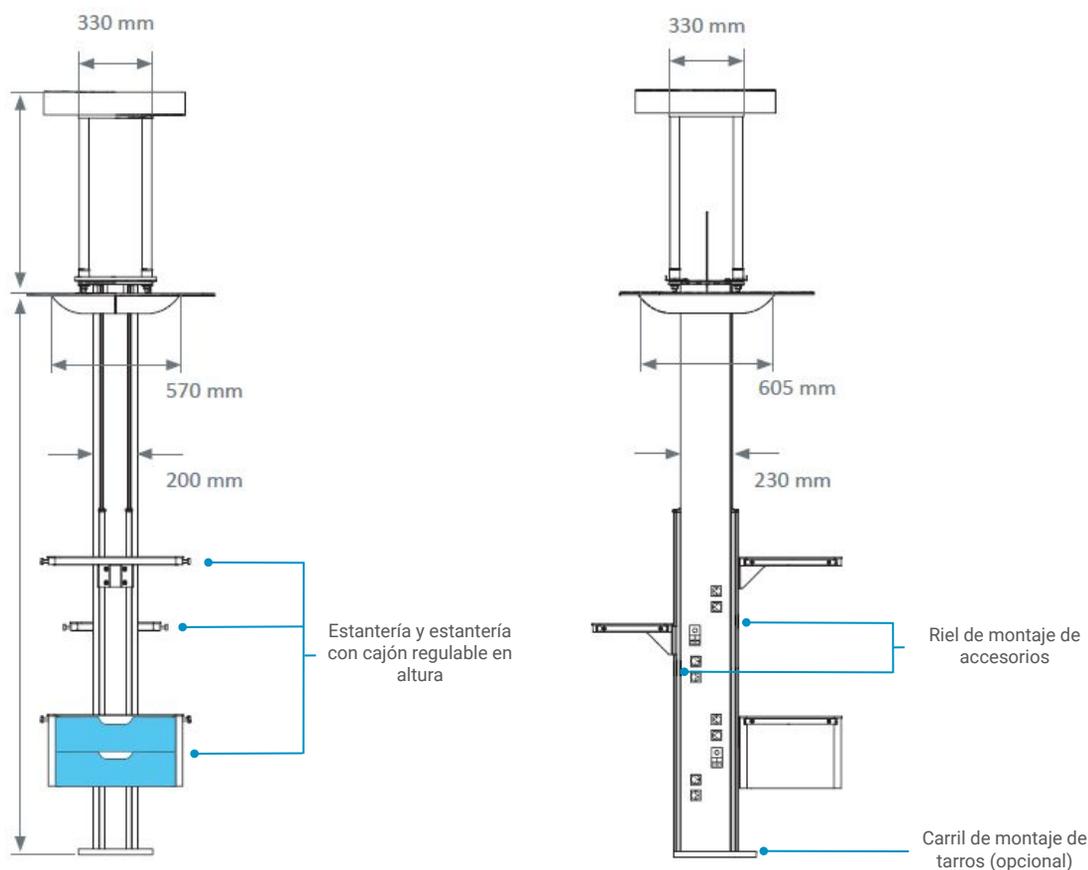

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France