

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

PANEL TÉCNICO TEDISEL Q PANEL

MODELO

Q Panel

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- DIRECTIVA 93/42/CEE

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Tedisel
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

Q Panel compacto e integrado

El quirófano es el lugar donde encontramos un mayor número de equipamientos médicos. El Q Panel compacto, fabricado en resina compacta HPL, está ideado para centralizar todos los elementos de un quirófano. Queda completamente integrado en la pared.

Posibilidad de incorporar diferentes elementos

- Tarjetas de control individualizadas, con diferentes funciones: Control de Alumbrado Perimetral, Control Estado de Baterías, Control Estado de Carga SAI, e Control Estado de Quirófano;
- Posibilidad de incorporar Repetidor de Alarmas eléctricas y Repetidor de Alarmas de gases;
- Cronómetro digital y Cronómetro con mando. Reloj analógico con batería;
- Instalación de Teléfono Manos Libres, tanto el modelo digital como el analógico;
- Incorporación de gases en un compartimento totalmente independiente.



CONFIGURACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje: 120/230V

Frecuencia: 60/50Hz

Corriente: máx. 20/16A por circuito

CARACTERÍSTICAS DE GASES

Gases medicinales: Oxígeno y protóxido de nitrógeno

Aire comprimido: 5 bar

Aire comprimido para toma de aire motriz: 10bar

Vacío: 5bar

Evacuación de gases anestésicos

MEDIDAS ESTANDARS

Panel una puerta 1250 x 1050 x 195 mm

Panel dos puertas sin gases 1250 x 1500 x 195 mm


Panel dos puertas con gases 1250 x 1700 x 195 mm

Panel tres puertas sin gases 1902 x 1500 x 195 mm

Panel tres puertas con gases 1902 x 1700 x 195 mm

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES HERMES

- Unidad principal o PLC (autómata programable): gestión de la información;
- PC + Pantalla táctil: permite la visualización y control de parámetros;
- Pantallas disponibles: 15";
- CPU (última generación): Intel ATOM® Dual Core;
- 2xRS-232, 1xRJ-45, 5xUSB 2.0, 1xAudio Port, 1xVGA Port, 1xPower Jack, 1xHDMI port, 1xDVI-D port, 1xRJ-45 (opcional);
- Altavoz y micro (opcional);
- Cámara (opcional);
- Wireless LAN 802.11.

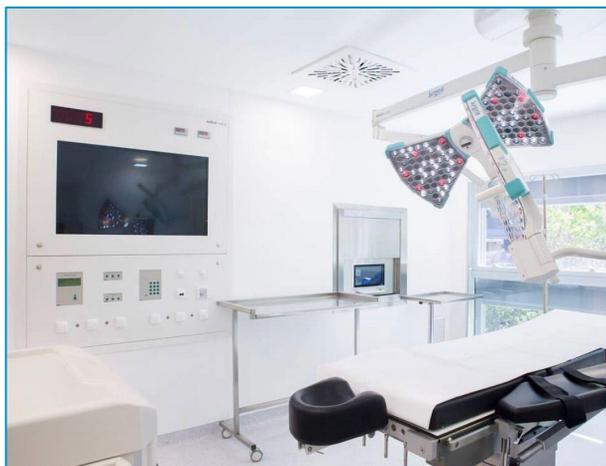

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Q Panel	Quirófano

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: Tedisel Medical. Sant Lluç, 69-81 Nave 5, 08918 - Badalona, Barcelona - Spain

Ref: Ficha técnica Q Panel, 10-2016.globus.es e Manual de Instalación Panel Técnico Quirófano, Rev 3, 07/07/2013

pág. 2/2

FTIE043A
ES