

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV TECH-CARE AUTOLIFT & ERGOFIX

MODELO

Tech-Care Autolift & Ergofix

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

Los brazos suspendidos TECH-CARE Autolift y Ergofix satisfacen la mayoría de los requisitos de los profesionales sanitarios y proporcionan armonía y seguridad a la hora de levantar y transportar dispositivos y accesorios biomédicos (como el carro de endoscopia, el ventilador y la máquina de anestesia). La versión motorizada del brazo Autolift permite elevar los equipos con rapidez y sin esfuerzo.


Su configuración técnica y ergonómica personalizada proporciona modularidad y un rango de movimiento de 40 a 315°. La flexibilidad de los brazos permite el acceso de los pacientes, la organización del área y la limpieza de las zonas de tratamiento.

El colgante de techo TECH-CARE permite un movimiento horizontal de 500 a 2000 mm, según la configuración. Su versión motorizada permite un recorrido vertical de 680 mm. Su versión estándar está equipada con un sistema de frenado mecánico de rotación por fricción, y está disponible un sistema de frenado electroneumático o electromagnético opcional. Las nuevas cajas están diseñadas para ser ergonómicas y fáciles de usar para todos los equipos de asistencia. Dispensan gases medicinales en corrientes débiles y fuertes.



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Tech-Care Autolift & Ergofix	UCI /Quirófano /Gastro

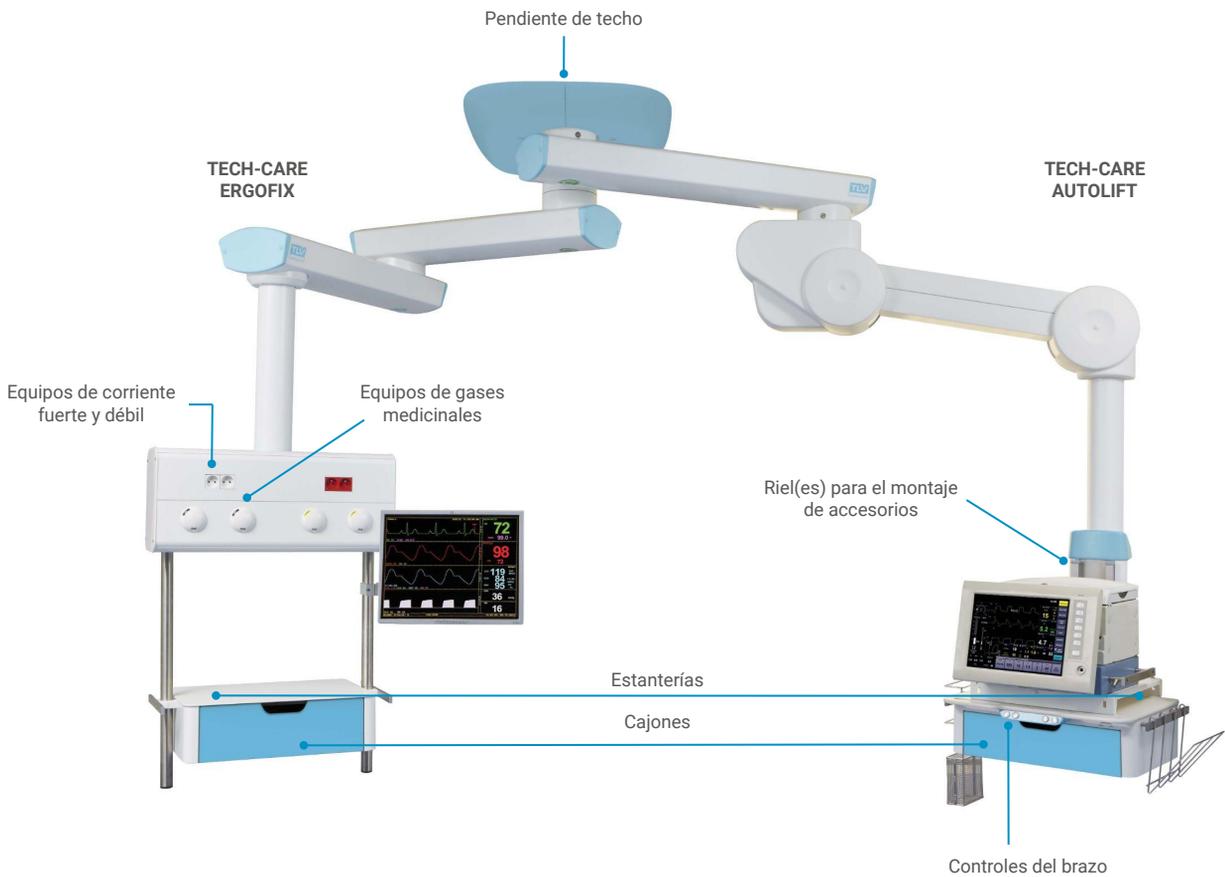

CONFIGURACIÓN MONO

Configuración mono, brazo único, caja vertical



Configuración mono, doble cuello, caja vertical



Configuración mono, un solo brazo motorizado, caja vertical



Configuración mono, doble brazo motorizado, caja vertical



Configuración de la columna vertical




CONFIGURACIÓN DÚO

Configuración dúo, brazo único con caja vertical, brazo único motorizado con caja vertical




Configuración dúo, brazo doble con caja vertical, brazo doble motorizado con caja vertical

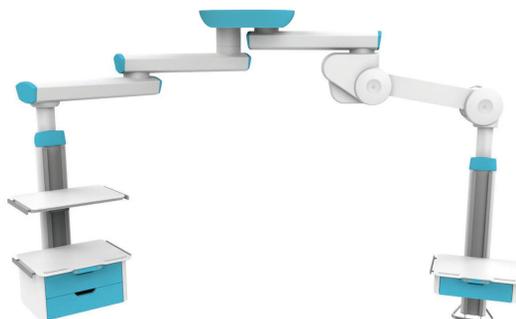

Configuración doble, brazo doble con caja vertical, columna vertical



Configuración doble, brazo cuello: caja vertical, caja horizontal

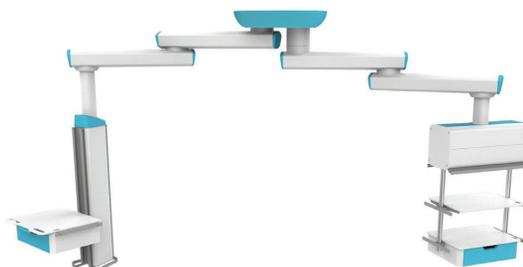

Configuración doble, de un solo brazo: caja vertical, caja horizontal



Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France