

ACCESORIOS ASPIRACIÓN FLOVAC

MODELO

FLOVAC

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase I (si se aplica)
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Los contenedores desechables FLOVAC se utilizan para la recogida de fluidos orgánicos en los sistemas de aspiración y están diseñados y fabricados para aplicaciones de "alto flujo y alto vacío". Es un producto sanitario.

Este sistema combina la sencillez y la practicidad de uso, garantizando la máxima seguridad contra la contaminación para los operarios, el equipo de aspiración y el medio ambiente. Los contenedores están disponibles en tres tamaños (1, 2 y 3 litros) y en dos versiones diferentes:

Versión REUTILIZABLE: compuesta por un contenedor rígido de soporte reutilizable y un sistema de recogida desechable consistente en una bolsa hermética a la tapa;

Versión CANISTER: sistema totalmente desechable compuesto por un recipiente rígido y una tapa que se cierra herméticamente a él.

El sistema FLOVAC cuenta con el filtro antibacteriano hidrofóbico GORE™ Medical Membrane. Además de detener la aspiración cuando se alcanza el nivel máximo permitido, el filtro de membrana garantiza la protección bacteriana del sistema de vacío del hospital con una eficacia casi absoluta.

Todos los componentes son libres de C.V.P. y látex natural.



1




2

CARACTERÍSTICAS FLOVAC

- Material de la cubierta: HPDE (polietileno de alta densidad)
- Conector VACÍO: hembra cónica
- Conector PACIENTE: Ø 14-15,5mm (Ø 8-9,2mm con conector angular)
- Conector TANDEM: Ø 8-9,2mm
- Valor máximo de aspiración -750 mbar
- Caudal máximo: 42 LPM
- Rango de graduación máximo: 50 ml
- Tamaño de la manguera del paciente: Ø interno ≥ 6 mm (recomendado Ø 6x9 mm L=2,5 m MAX)
- Dimensiones del tubo de alimentación: Ø interno ≥ 6 mm (L=1,8 m MAX)
- Vida útil del producto: 5 años desde la fecha de fabricación

FILTRO ANTIBACTERIANO HIDROFÓBICO

- Material del prefiltro: microfibras de vidrio
- Soporte: "Woven-non-woven" PE/ PES
- Membrana: GORE™ Medical Membrane 100% PTFE expandido
- También resistente a la espuma y a los humos
- Rendimiento de filtración (típico): 99,999995% con partículas de 0,1 µ

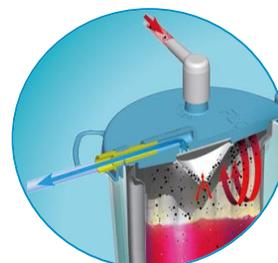

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	LEYENDA
169392	BOLSAS FLOVAC 1L (50 UD)	50	1
169393	BOLSAS FLOVAC 2L (50 UD)	50	1
169394	BOLSAS FLOVAC 3L (50 UD)	50	1
110858	FRASCO REUTILIZABLE FLOVAC 1L (x15)	15	3
110859	FRASCO REUTILIZABLE 2L (X10)	10	3
110860	FRASCO REUTILIZABLE 3L (X5)	5	3
110707	CANISTER FLOVAC 1L (60 UD)	60	2
110708	CANISTER FLOVAC 2L (50 UD)	50	2
110709	CANISTER FLOVAC 3L (30 UD)	30	2
118697	ARO FLOVAC CON PLACA 30X5	1	4
110857	ARO FLOVAC CON PLACA 25X5	5	4
162786	CONECTOR DE ENTRADA PARA FLOVAC (x25 und)	25	5
162787	MANGUERA 0,38m+CONECTOR FLOVAC (x 50 und)	50	-
118703	SOPORTE MURAL FLOVAC - 30X5 mm	1	6
69418	SUPORTE PAREDE PLASTICO 25X5	1	6
110769	TROLLEY PARA FLOVAC - 4 PUESTOS	1	7
168399	TUBO DE SILICONA PARA ASPIRACIÓN 6x12 MM (25M)	1	-



3



4



5



6



7