

MODELO


AMVEX

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** OHIO Medical.
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** VR XXXXX

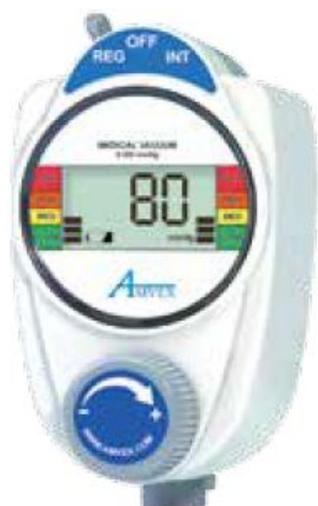

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de succión Amvex tienen la finalidad de regular una presión de succión suministrada al nivel de vacío deseado por el usuario. Un manómetro muestra el valor de la succión regulada, la cual se puede ajustar a través de una perilla de regulación.

- Facilidad de lectura de la escala mediante pantalla digital hasta a 9 metros de distancia
- Tipos:
 - Adulto
 - Pediátrico
- Facilidad de uso:
 - No requiere calibración
 - Número en tamaño grande que indican con precisión el nivel de flujo
 - Permite interrumpir la aspiración sin necesidad de cerrar la válvula de control de aspiración.
 - El sistema PUSH permite un rápido intercambio de accesorio.

Es un producto sanitario.

CONFIGURACIÓN

- Vacuómetro protegido e integrado en ABS, de fácil lectura. La integración completa en un único producto mejora la durabilidad del mismo. Existen varios colores disponibles de carcasa.
- Escala de regulador de vacío mediante colores:
 - Adulto: 0 - 200 mmHg
 - Pediátrico: 0 - 160 mmHg
- Escala de colores:
 - Flujo bajo: verde
 - Flujo medio: amarillo
 - Flujo rojo: alto
- Indicador de batería baja
- Selección de modos: ON/OFF CONT/INT (Pulsado posiciones continuo/intermitente/apagado) - Dispositivo REG-OFF-INT
- Dirección de escala: en el sentido contrario a las agujas del reloj
- Precisión del vacuómetro: $\pm 1\%$ del valor de escala completa
- Caudal máximo de aspiración:
 - Intermitente: 0 - 8 L/min ± 5 L/min a -200 mbar
 - Continuo: 0 - 80 L/min ± 5 L/min a -200 mbar

DIMENSIONES: 16,51 x 7,1 x 12,19 cm

PESO: 570 g.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASPIRACIÓN MÁX	TIPO TOMA	RACOR	CAUDAL
191409	AMVEX ADULTO REGULADOR VAC C/I AFNOR	200 mbar	AFNOR	Toma	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191410	AMVEX ADULTO REGULADOR VAC C/I -RAIL AFNOR	200 mbar	AFNOR	Rail	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191411	AMVEX PEDIÁTRICO REGULADOR VAC C/I AFNOR	160 mbar	AFNOR	Toma	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191412	AMVEX PEDIÁTRICO REGULADOR VAC C/I -RAIL AFNOR	160 mbar	AFNOR	Rail	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
193820	AMVEX ADULTO REGULADOR VAC C/I CM	200 mbar	CM	Toma	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
192643	AMVEX ADULTO REGULADOR VAC C/I RAIL CM	200 mbar	CM	Rail	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
193821	AMVEX PEDIÁTRICO REGULADOR VAC C/I CM	160 mbar	CM	Toma	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
193852	AMVEX PEDIÁTRICO REGULADOR VAC C/I RAIL CM	160 mbar	CM	Rail	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191390	AMVEX ADULTO REGULADOR VAC C/I DIN	200 mbar	DIN	Toma	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191391	AMVEX ADULTO REGULADOR VAC C/I -RAIL DIN	200 mbar	DIN	Rail	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191402	AMVEX PEDIÁTRICO REGULADOR VAC C/I DIN	160 mbar	DIN	Toma	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar
191403	AMVEX PEDIÁTRICO REGULADOR VAC C/I -RAIL DIN	160 mbar	DIN	Rail	Intermitente: 0 - 8 L/min Continuo: 0 - 80 L/min a -200 mbar

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA
191413	FILTRO AMVEX CONT./INTERM, PACK 20	20
191414	FILTRO AMVEX CONT./INTERM, PACK 200	200
198564	FILTROS VACÍO ITC (20 UNIDADES)	20