

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

TOMA GASES MEDICINALES CM

MODELO

TOMA CM

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad Es un producto sanitario.
- En conformidad con la norma UNE-EN ISO 9170-1




REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Carburos Metálicos
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 75XXX

DESCRIPCIÓN

Son unidades terminales de la canalización que permiten el suministro de los gases medicinales y de vacío a través de los distintos conectores CM selectivos, garantizando un gran caudal y de forma constante. Es un producto sanitario.

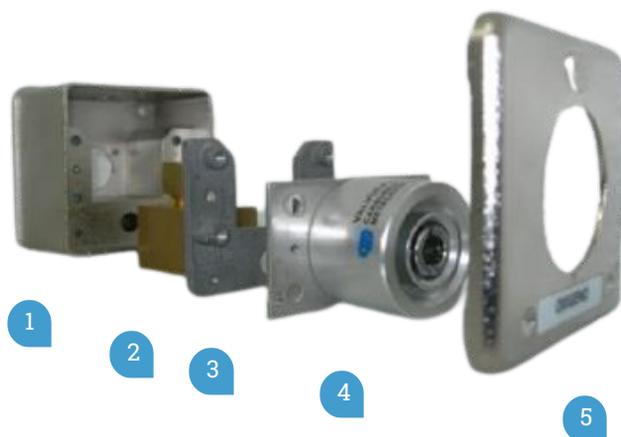

CONFIGURACIÓN



6



7

- 1 Caja empotrable o en superficie de aluminio inyectado,
- 2 Taco de entrada para montaje en caja mural con válvula de corte incorporada, con conexión trasera o lateral.
- 3 Soporte selectivo, para montaje mural y en equipos.
- 4 Válvula de la toma con doble selectividad (al soporte selectivo del taco y al conector) y con el color característico del gas.
- 5 Tapa o embellecedor de aluminio con indicación del gas para montaje mural.
- 6 Para montaje en equipos, se emplea un anillo embellecedor redondo de plástico.
- 7 Para montaje en equipos, se emplea un taco distinto con tubo de cobre incorporado y sin necesidad de agregar la caja mural, el cual debe incluir un kit taco del gas correspondiente.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO TOMA	TIPO
102256	TOMA OXÍGENO CM CUADRADA NUEVA	O2	CM	Empotrar
102258	TOMA VACÍO CM CUADRADA NUEVA	VC	CM	Empotrar
102259	TOMA AIRE CM CUADRADA NUEVA	AIRE	CM	Empotrar
190320	O2 - TAPA TOMA MURAL CM	O2	CM	Empotrar
190324	VACÍO - CAJA MURAL CM Entrada Lateral	VC	CM	Empotrar
190327	AIRE - CAJA MURAL CM Entrada Lateral	AIRE	CM	Pared
190326	VACÍO - TAPA TOMA MURAL CM	VC	CM	Pared
190329	AIRE - TAPA TOMA MURAL CM	AIRE	CM	Pared